

28181
ELCROSS[®] Ankle



Användningsområden/**Indikationer**

Denna produkt är avsedd att användas för avlastning av svaga vrister och som stöd efter lättare idrottsskador.

Kontraindikationer

Ligament ruptur, frakturer, kraftiga ödem till följd av t.ex. diabetes och hjärt- & kärlsjukdomar.

Justering

Ändringar av denna produkt får enbart göras av sjukvårdskunnig personal.

Varning

Se till att bandaget inte späns åt för hårt. Om någon form av irritation eller hudproblem uppstår, tag genast av bandaget. Kontrollera huden för tryckmärken dagligen.

Materialspecifikation

Bandaget är tillverkat av en bomullsstrumpa och ett elastiskt resårmaterial. Produkten är inte flamskyddsbehandlad.






Tvättinstruktion

Fäst alla kardborrband i materialet före tvätt. Använd tvättpåse. Maskintvättas i 40°C. Plantorkas. Får ej torktumlas eller kemtvättas.

Vid frågor

Om några problem uppstår, tag av bandaget och kontakta utprovaren eller inköpsstället.

Instruktion

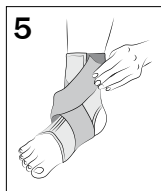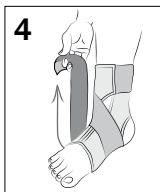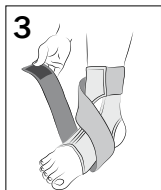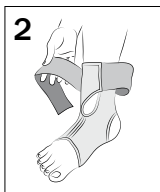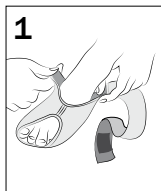

Kontrollera att produkter är hel och fri från skador.

1. Drag på strumpan som en sock på foten.
2. Det elastiska bandet skall först föras bakom benet och sen fram mot fotryggen.
3. Drag bandet ner under foten och tillbaka upp mot kardborrlåsningen (som en åtta).
4. För extra stabilitet kan draget göras något kraftfullare på fotens yttersida för att "lyfta" upp foten.
5. Efterjustera så att bandaget sitter bekvämt.

Anvendelsesområde/Indikationer

Dette produkt er lavet til anvendelse for aflastning af svage ankler og som støtte efter lettere idrætsskader.

Kontraindikationer

Ligament ruptur, frakturer, kraftige ødem til følge af f.eks diabetes og hjerte- & karsygdomme.

Justering

Ændring af dette produkt må kun udføres af sygeplejefagligt personale.

Advarsel

Sørg for ortosen ikke spændes for hårdt. Hvis nogen form for irritation eller hudproblem opstår, tag straks ortosen af. Kontrollér dagligt huden for trykmærker.

Materialespecifikation

Ortosen består af en bomuldsstrømpe og et elastisk gummimateriale. Produktet er ikke behandlet med flammehæmmende midler.






Vaskeinstruktion

Luk alle velcrobånd i materialet før vask. Brug vaskepose. Maskinvaskes i 40°C. Lufttørres. Må ikke tørretumbles eller kemisk renses.

Ved spørgsmål

Hvis der opstår problemer, tag ortosen af og kontakt den som har udleveret produktet eller indkøbsstedet.

Instruktion

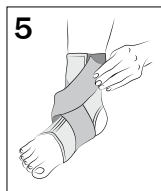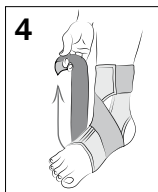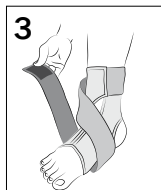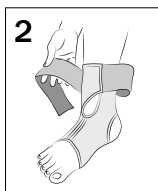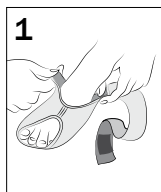

Kontroller at produktet er helt og fri for skader.

1. Tag strømpen på som en sok på foden.
2. Det elastiske bånd skal først føres bagved benet og derefter foran mod fodryggen.
3. Træk båndet ned under foden og tilbage op mod velcrobåndlukningen. (som et 8-tal).
4. For ekstra stabilitet kan trækket gøres lidt hårdere på fodens yderside for at "løfte" foden op.
5. Juster efter så ortosen sidder behageligt.

Bruksområder/indikasjoner

Dette produktet er beregnet til bruk for avlastning av svake ankler og som støtte etter lettere idrettsskader.

Kontraindikasjoner

Ligament ruptur, frakturer, kraftige ødem på grunn av f.eks. diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Justering

Endringer på dette produktet må kun utføres av helsefaglig personale.

Advarsel

På på at ortosen ikke strammes til for hardt. Om det oppstår noen form for irritasjon eller hudproblemer, ta straks av ortosen. Kontroller huden for trykkmerker daglig.

Materialspesifikasjon

Ortosen er laget av en bomullsstrømpe og et elastisk materiale. Produktet er ikke behandlet med flammehindrende materiale.





Vaskeanvisning

Lukk alle borrelåsband i materialet før vask. Bruk vaskepose. Maskinvaskes i 40°C. Tørkes flatt. Kan ikke tørkes i trommel eller renses kjemisk.

Ved spørsmål

Om det oppstår noen problemer, ta av ortosen og kontakt utprøveren eller innkjøpsstedet.

Instruksjon

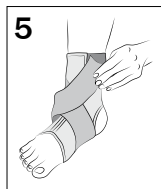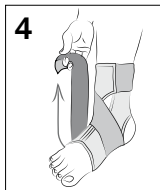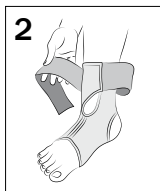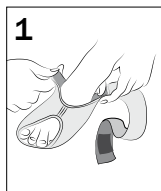

Kontroller at produktet er helt og uten skader.

1. Dra på strømpen som en sokk på foten.
2. Det elastiske båndet skal først føres bak benet og så fram mot vristen.
3. Dra båndet ned under foten og tilbake opp mot borrelåsingen (som et åttetall).
4. For ekstra stabilitet kan draget gjøres noe kraftigere på fotens ytterside for å "løfte" opp foten.
5. Etterjuster så ortosen sitter behagelig.

Käyttöalueet/indikaatiot

Tuote on tarkoitettu lievittämään rasitusta nilkassa sekä antamaan lisätukea lievässä urheiluvammoissa.

Kontraindikaatiot

Ligamentti repeämät, murtumat, voimakas ödeema esim. diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien seurauksena.

Säätäminen

Vain ammattitaitoinen henkilö saa tehdä muutoksia tuotteeseen.

Varoitus

Älä kiristä tukea liikaa. Jos ihossa ilmenee ärsytystä tai muita oireita, riisu tuki heti. Tarkista ihon kunto päivittäin.

Materiaali

Tuki on valmistettu puuvillasukasta ja joustavasta resorista. Tuote ei ole tulenkestävä.


Pesuohteet

Sulje kaikki tarranauhat ennen pesua. Käytä pesupussia. Pese koneessa 40°C:ssa. Tasokuivaus. Ei saa kuivata kuivausrummussa tai pestä kemiallisesti.

Kysyttävää

Jos tuen käytössä ilmenee ongelmia, riisu se ja ota yhteyttä sovittajaan tai ostopaikkaan.

Sovitusohjeet

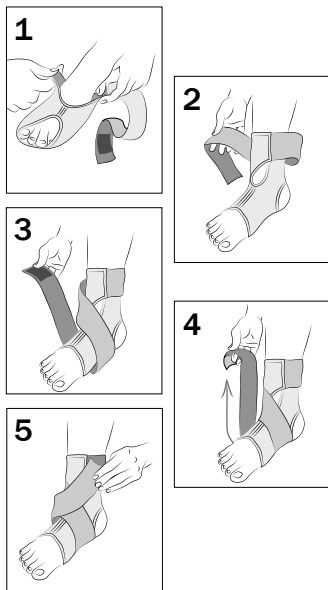

Varmista, että tuote on ehjä.

1. Pujota tuki jalkaasi kuten sukka.
2. Joustava nauha tulee ensin kiertää nilkan ympäri ja sitten vetää holvikaaren ylitse.
3. Vedä nauha edelleen jalan alitse ja sieltä ylös kohden tarranauhakiinnitystä (nauha muodostaa kahdeksikon).
4. Lisästabiiliteetin saamiseksi voidaan nauhaa vielä kiristää voimakkaammin sivulta siten, että jalka "nousee" hieman ylös.
5. Säädä tuki siten, että se tuntuu mukavalta.

Intended use/Indications

This product should be used to unload weak ankles and as support for light sprains and sports injuries.

Contraindications

Ligament ruptures, fractures, severe oedema from diabetes, or other circulation problems.

Adjustments

This product must only be altered by a medical professional person.

Warnings

Make sure that the support is not tightened to hard as this can cause circulation problems. If any skin irritation occurs, immediately remove the support. Check skin for pressure marks on a daily basis.

Material specification

This product is made from cotton with an elastic strap. This product is not flame retardant.





Wash

Close all Velcro straps into material prior to laundering. Use a washing bag. Machine wash in 40°C. Dry on a flat surface. Do not tumble dry or dry clean.

Contact


If any problem's occurs, remove the support and contact your physician or were the product was purchased.

Instruction

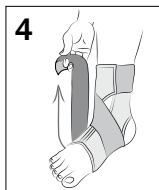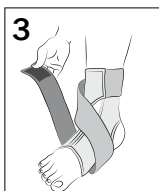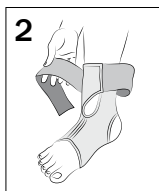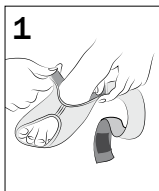


Check that the support is complete and without damage.

1. Pull on to the foot like a sock.
2. The elastic strap should first go behind the leg and then over the foot.
3. Pull the strap under the foot and give it a slight pull before it comes up on top of the foot again (like a figure-8).
4. To increase the stability, make a slightly harder pull to lift the lateral edge to prevent the foot from falling outwards.
5. Adjust for comfort.

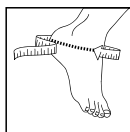

Art.nr.	Size	Circumferens anke
28181 1011	Left, Small	20 - 25 cm
28181 2011	Right, Small	20 - 25 cm
28181 1013	Left, Large	25 - 30 cm
28181 2013	Right, Large	25 - 30 cm


 Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38
 SE-254 67 Helsingborg, Sweden
 Phone +46 42 25 27 01



SVERIGE	DENMARK	SUOMI	NORGE	UK/IRELAND	USA	INTERNATIONAL
Tel 042-25 27 01	43 96 66 99	09 350 76 30	23 23 31 20	+353 42 932 8177	888-678 6548	+46 42 25 27 01
Fax 042-25 27 25	43 43 22 66	09 350 76 388	23 23 31 21	+353 42 932 8182	800-289 0809	+46 42 25 27 25
info@camp.se	info@camp.dk	info@camp.fi	info@camp.no	info@allarduk.co.uk	info@allardusa.com	info@allardint.com

Support For Better Life • www.allardsupport.com